


AIRIAL CHAMBER

COLLAPSIBLE HOLDING CHAMBER FOR METER DOSE INHALERS


Model # MQ8001

1

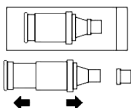


Remove AIRIAL CHAMBER from package. Extend to full length into locked position and remove cap.

2

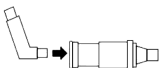


Remove MDI canister mouthpiece cover. Insert MDI canister mouthpiece into the elastic opening at the back of the chamber.

3

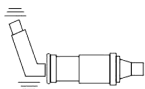


Shake MDI canister and AIRIAL CHAMBER assembly 3-4 times.

4

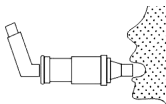


Put Aerial Chamber mouthpiece between teeth. Close lips around mouthpiece.

5

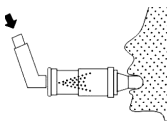

Exhale normally. Press down on MDI canister to release medication.

6

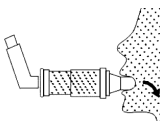

Take a slow, deep breath through the mouthpiece. Hold breath for 5-10 seconds. Exhale through the mouthpiece. Take a second breath to ensure that all medication has been consumed.

Cleaning Instructions: Wash the Aerial Chamber in warm soapy water. Rinse with clean water and set aside to dry.

Precautions: Over time, the elastic rear opening and/or one-way valves may harden and not work effectively. Replace with a new Aerial Chamber.

Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.



Made in China

Manufactured For: Drive Medical
99 Seaview Blvd.
Port Washington, NY 11050
Tel: (866) 694-5085


www.drivemedical.com

AEROCÁMARA AIRIAL

AEROCÁMARA PLEGABLE PARA INHALADORES DE MEDICAMENTO


Artículo # MQ8001

1

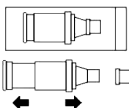


Retire AIRIAL CÁMARA de paquete. Extienda en toda su longitud en posición de bloqueo y retire la tapa.

2

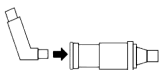


Retire MDI cubierta de la boquilla bote. Inserte MDI recipiente boquilla en la abertura elástica en la parte posterior de la cámara.

3

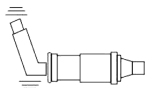


Agite MDI bote y montaje AIRIAL CÁMARA 3-4 veces.

4

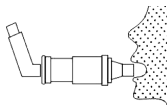


Ponga Cámara Airial boquilla entre los dientes. Cerrar los labios alrededor de la boquilla.

5

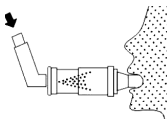

Exhale normalmente. Presione hacia abajo en MDI bote para liberar la medicación.

6

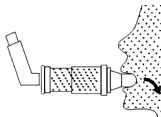

Tome una respiración lenta y profunda a través de la boquilla. Sostenga el beath durante 5-10 segundos. Exhale a través de la boquilla. Tome un segundo aliento para asegurarse de que toda la medicación se ha consumido.

Instrucciones de limpieza: Lavar la Cámara Airial en agua tibia y jabón. Enjuague con agua limpia y deje secar.

Precauciones: Con el tiempo, la abertura posterior elástica y / o de un solo sentido válvulas pueden endurecerse y no trabajar de manera efectiva. Reemplace con una nueva Cámara Airial.

Precaución: Federal (EE.UU.) establece que este aparato a la venta por o a la orden de un médico.



Hecho en China

Fabricado por: Drive Medical
99 Seaview Blvd.
Port Washington, NY 11050
Tel: (866) 694-5085


www.drivemedical.com

AIRIAL CHAMBER

HOLDING CHAMBER FOR METER DOSE INHALERS


Model # MQ8100

1

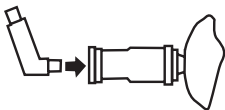


Remove the caps from the chambered and metered-dose inhaler. Shake the metered-dose inhaler vigorously. Insert the mouthpiece of the inhaler into the rubber-sealed end of the chamber.

2

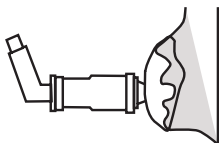


Have your child stand or sit up straight. Put the mask on the child's face, covering both the nose and mouth. The mask must be pressed to your child's face to assure that the medicine can get to the child's lungs.

3

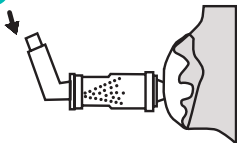

Depress the metered-dose inhaler once. Have your child breathe in and out slowly through the valved holding chamber for at least 5 breaths.

4

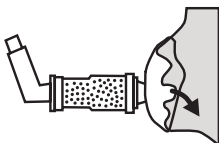


When your healthcare practitioner prescribes additional puffs, wait 1 minute and repeat.

AEROCÁMARA AIRIAL

AEROCÁMARA PARA INHALADORES DE MEDICAMENTO


Artículo # MQ8100

1

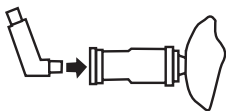


Remueva las tapas de la Aerocámara y del inhalador. Agite el inhalador vigorosamente e inserte la boquilla en la parte de la Aerocámara que está sellada de caucho.

2

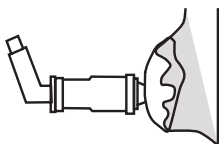


Coloque al menor de pie o siéntelo de frente. Coloque la mascarilla en la cara del menor de manera que cubra la nariz y la boca. La mascarilla debe presionarse contra la cara del menor para asegurarse que el medicamento llegará a los pulmones.

3

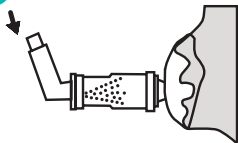

Presione el inhalador una sola vez. Haga que el menor inhale y exhale lentamente 5 veces aproximadamente.

4

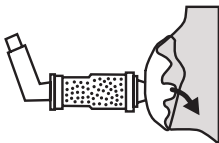

Si el médico receta inhalaciones adicionales, espere un minuto y repita el procedimiento.